

側面からの散乱線が気になる方へ

タングステンシート付【DRV-X31T】



タングステンシートデータ

mGy / min

	タングステンシート有	ブランク
透過線量率	1.629±0.003	6.161±0.003



水洗い不可

鉛当量 (100kV) : 0.11±0.02mmPb
放射線遮蔽率 : 73.56%

東京都立産業技術研究センター検査結果
試験方法 J I S T 6 1 3 3 1 - 1

タングステンシートは貼付けですので水洗いは出来ません。
メガネが汚れた場合はタングステンシートが濡れないように
汚れを拭き取って下さい。

価格はタングステンシート付も同じですが後からの貼付けの場合は別途費用が掛かります。
タングステンシート付をご注文の際は品番最後の T を必ず付けて下さい。



ドクタービュー
Dr. View X-RAY FO

放射線防護眼鏡



【販売元】
有限会社エネアコーポレーション
〒910-0854
福井県福井市御幸3-13-24
ミュキビル2F
TEL: 0776-37-3000

【製造販売元】
日本レンズ工業株式会社
〒596-0823
大阪府岸和田市下松町2丁目3-25

【お問い合わせ先】

ユフ精器株式会社
インターベンション事業部
〒113-0034
東京都文京区湯島二丁目31番20号
☎ 03-3811-1131
FAX 03-3811-1727
✉ xray.info@yufu.co.jp

放射線防護用術者向け眼鏡

ドクタービュー Dr. View X-RAY タイプFO

【DRV-X31】



ドクタービュー X-RAY タイプFOは、メガネの上から掛けられる
オーバーグラスタイプの放射線防護眼鏡です。(メガネ無しでもご使用できます)
レンズには放射線遮蔽率約 98%を誇る鉛含有ガラスレンズを採用しています。

鉛レンズデータ

鉛当量 (150kV) : **0.73**±0.02 mmPb

放射線遮蔽率 : **97.60**%

(地独) 東京都立産業技術研究センター検査結果
32 依開環 第751号
試験方法 J I S T 6 1 3 3 1 - 1

	鉛レンズ有	ブランク	mGy / min
透過線量率	0.870±0.001	36.21±0.01	

一般医療機器 (クラス I)
製造販売届出番号 : 27B3X00018000344

鉛ガラス
レンズ
0.75mmPb
鉛当量



メガネの上から可



水洗い可

水洗い後すぐに水分を
拭き取って下さい

希望小売価格 ¥ 48,000 (税別)



放射線防護眼鏡用に専用設計された
フロント部分は安心の国内生産で、
快適な掛け心地とフレーム強度を
両立させています。

サイドのツル部分にセットできる
専用のヘッドバンド付です。
取り付け取り外しが簡単です。
専用ヘッドバンドで抜け落ちる
心配がありません。




ヘッドバンドの装着方法

ヘッドバンドのフックをツルのスリットにはめ込みます。



ヘッドバンドには左右がございましてので
ヘッドバンドの先端を《R》→右側《L》→左側のツルの穴に
引っかけてカチッと音がするまでスライドさせて下さい。

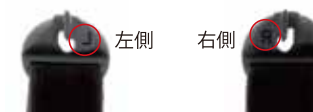

カラーバリエーション



グリーン【G】



レッド【R】

■素材

【フレーム】

フロント : ポリアミド

ツル : ポリカーボネート

【ヘッドバンド】ゴムバンド

■重量 / 80 g (タグ・ステント付 82 g)

■付属品 / ケース・ヘッドバンド・メガネ拭き