

Dr. View ドクタービュー DRV-100/200



超防曇 + 防傷効果が**持続**するお手入れ簡単なサージカルグラスです。
毎日洗って1か月以上ご使用いただけるのでディスプレイよりお得です。

NK コート（超防曇 / 防傷）付きサージカルグラス

DRV-100



頭にフィットする形状で
柔らかい鼻パッドと
弾力性があるツル素材でソフトなかけ心地

DRV-200



オーバーグラスタイプで
メガネの上からも使用可能



NK（超防曇 + 防傷）コートの特徴

欧州規格 EN166 【N】 防曇性 【K】 耐傷性をクリアしたコート使用

◆水洗い・中性洗剤での洗浄 **OK**


※中性洗剤で洗浄後ティッシュで拭き上げ呼吸をあてる⇒50回OK 当社調べ

◆アルコール消毒液での洗浄 **OK**

※消毒用エタノールを脱脂綿で塗布⇒水洗い後ティッシュで拭き上げ呼吸をあてる⇒50回OK 当社調べ



DRV-200/ アルコール洗浄 30 回後

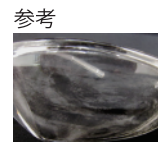

当社従来曇り止め / アルコール洗浄 1 回で白濁

◆オートクレーブ（1.2 気圧 / 120℃ / 20 分）対応

※コートの防曇性には問題ありませんが
ラバー部分が5回以上で破損する場合があります 当社調べ

◆傷がつきにくい高い防傷性

※欧州規格 EN 168:2001 準じた 3000 回往復摩耗テストOK / 5000 回往復摩耗テスト後防曇コート試験OK
日本眼鏡普及光学器検査協会調べ

【フレーム】ポリカーボネート
【鼻パッド】TPR (DRV-100)
【モダン】TPR

【重量】
DRV-100: 26g
DRV-200: 35g

【可視光線透過率】90%
【紫外線カット率】99.9% UV400
【台湾製】

【JANコード】
DRV-100: 4589785011006
DRV-200: 4589785012003

希望小売価格
¥1,500（税別）

【販売元】

有限会社エネアコーポレーション

〒910-0854
福井県福井市御幸3-13-24
ミユキビル2F
☎ 0776-37-3000

【お問い合わせ先】

ユフ精器株式会社
インターベンション事業部

〒113-0034
東京都文京区湯島二丁目31番20号
03-3811-1131
FAX 03-3811-1727
✉ xray.info@yufu.co.jp